# 平成28年度NGSハンズオン講習会 ChIP-seq

2016年7月28日

# amelieff

#### 本講義にあたって


- 代表的な解析の流れを紹介します。
  - 論文でよく使用されているツールを使用します。
- コマンドを沢山実行します。
  - タイプミスが心配な方は、コマンド例がありますのでコピーして実行してください。
  - 実行が遅れてもあせらずに、課題や休憩の間に追い付いてください。

#### 本講義の内容

- ChIP-seqとは
- ChIP-seq解析の流れ
- 公開データの取得
- クオリティコントロール
- マッピング
- ピーク検出
- ピークアノテーション
- モチーフ探索
- まとめ
- 最後に

# ChIP-seqとは


- ChIP(Chromatin Immuno Precipitation) + NGS sequencing
  - クロマチン免疫沈降により濃縮したゲノム領域をシーケンスする手法
- 主な解析対象
  - タンパクとDNAの相互作用
  - ヒストン修飾

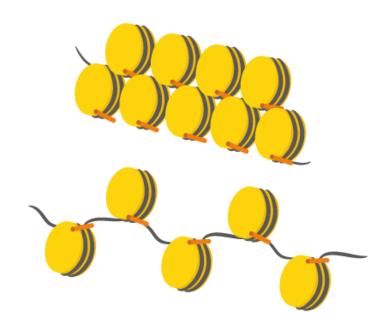

•Licensed under CC-BY 4.0 ©Togo picture gallery by DBCLS

# ChIP-seqとは

ChIP-seqで主に解析されるのは転写調節領域

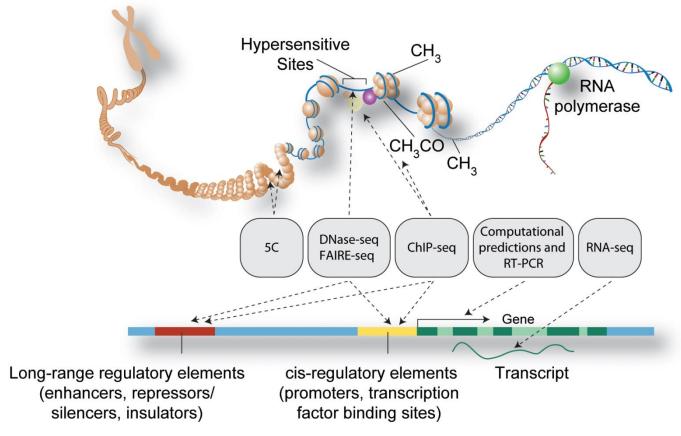

A User's Guide to the Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE), 2011より





# ChIP-seqとは | input と IP

ChIP-seqでは、免疫沈降のバックグラウンドノイズを削減するため、コントロールを使用することが多い

免疫沈降(IP)を行っていないサンプルをコントロールとして使用し、 検出したピークを抗体に非特異的なものとして取り除くために用いる

一般にこのコントロールを input と呼ぶ

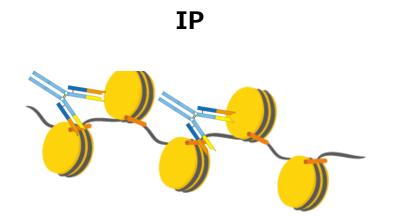

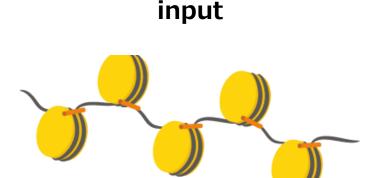


•Licensed under CC-BY 4.0 ©Togo picture gallery by DBCLS

# ChIP-seqとは


ChIP-seqでは、抗体が特異的に結合した領域をピークとして得る

---- :シーケンスリード

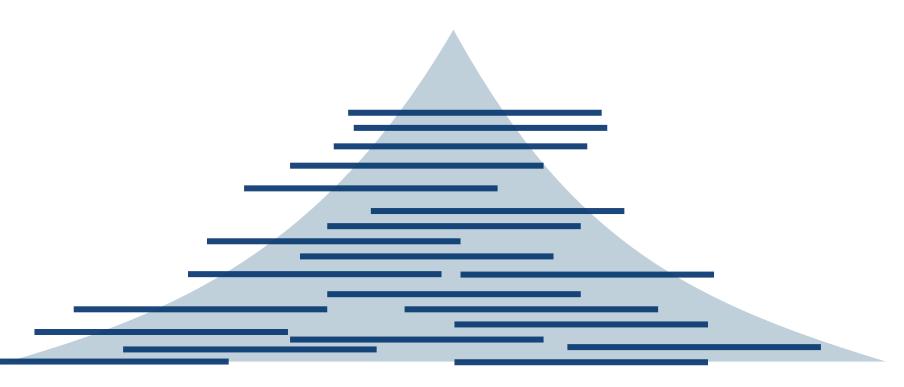

A User's Guide to the Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE), 2011より

# ChIP-seq解析の流れ|代表的なソフト

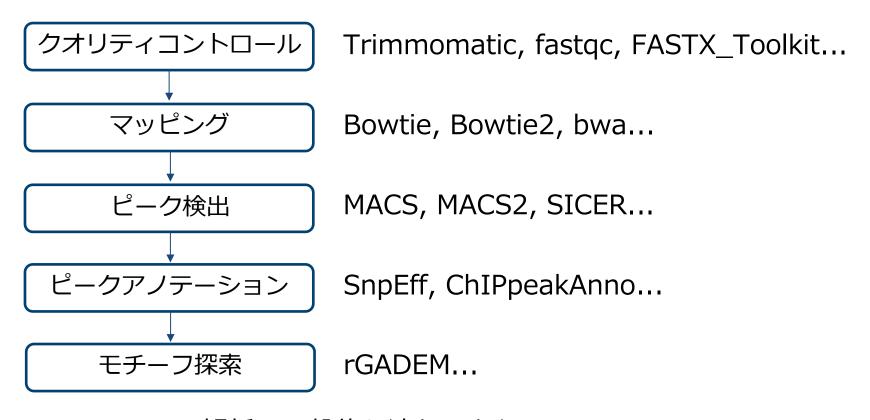

- ChIP-seq解析の一般的な流れであり、 全てのChIP-seqで同一の解析を行うわけではない
- 研究の目的やデータに合わせて、最適な解析を設計

#### クオリティコントロール

他のNGSデータ解析と同様に、解析前のクオリティコントロールを実施

- 本日使用するソフト
  - トリミング・低クオリティリードの除去
    - Trimmomatic
  - クオリティチェック
    - Fastqc
- ChIP-seqにおけるポイント
  - リード長に注意する(75 bp以下など短い場合が多い)

# マッピング


Reseqでも使用されるマッピングソフトがChIP-seqでよく使用される

- 本日使用するソフト
  - bowtie2
    - ギャップアラインメントに対応
    - マッピング精度が高い
- この他に使用されるソフト
  - bowtie
    - ギャップアラインメントに非対応
  - bwa

# ピーク検出

ピーク検出ソフトはIPで濃縮した領域のリードの頂点を検出する

- 本日使用するソフト
  - MACS2(デファクトスタンダード)
    - 被引用数 2750件 (2016年7月20日時点)
- この他に使用されるソフト
  - SICER
    - 被引用数 425件 (2016年7月20日時点)
  - MACS

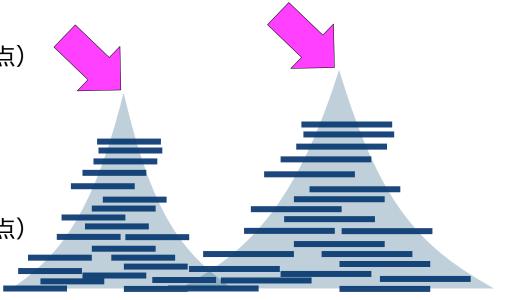

### ピークアノテーション

ピーク検出後に、ピークがゲノム上のどのような位置に存在するのか アノテーションする

- 本日使用するソフト
  - SnpEff
    - 遺伝子名を付与
    - 遺伝子上のドメイン(エキソン、上流など)を付与
    - 様々な生物種に対応
- この他に使用されるソフト
  - ChIPpeakAnno
    - Rパッケージ


#### モチーフ探索

検出されたピークに共通のモチーフを探索する モチーフは、抗体と結合する短い配列で、ピーク配列に共通して見られる


- 本日使用するソフト
  - rGADEM
  - Artistic License 2.0 (改変、再配布、商用可) なので利用しやすい
- この他に使用されるソフト
  - MEME
    - 商用利用不可

#### 今回の解析に必要なデータ

- リファレンスゲノム (実行済み)
  - http://support.illumina.com/sequencing/sequencing\_software/igenome.html

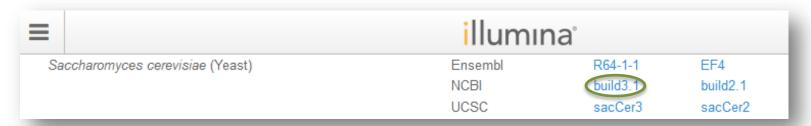

■ 解析対象のシーケンスデータ (実行済み)

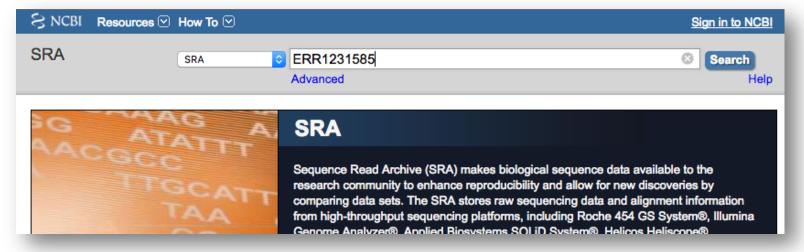

酵母のリファレンスゲノムデータの取得方法

```
$ wget ftp://igenome:G3nom3s4u@ussd-
ftp.illumina.com/Saccharomyces_cerevisiae/NCBI/build3.1/Saccha
romyces_cerevisiae_NCBI_build3.1.tar.gz
$ tar zxvf Saccharomyces_cerevisiae_NCBI_build3.1.tar.gz
```

Saccharomyces cerevisiaeのリファレンスゲノムをイルミナのWebページからダウンロードし解凍(実行済み)

\$ ls -1 /home/ユーザ名/Desktop/amelieff/sacCer3/

```
:

-rwxr-xr-x. 1 root root 12400379 5月 23 11:09 2016 genome.fa

-rwxr-xr-x. 1 root root 462 5月 23 11:09 2016

genome.fa.fai

-rwxr--r--. 1 root root 19041 5月 23 11:10 2016 mask.gtf

-rwxr-xr-x. 1 root root 643818 5月 23 11:09 2016 refGene.txt
```

/home/ユーザ名/Desktop/amelieff/Scerevisiae/の解凍したファイル(今回使用するもののみ)を確認



fastaファイルの中身の確認

\$ less /home/ユーザ名/Desktop/amelieff/Scerevisiae/genome.fa

#### >chrI


1行目: コンティグ名

2行目以降: 実際の配列情報


※「q」で閲覧を終了する


解析対象のシーケンスデータの取得方法

NCBI SRA(<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra</a>) ヘアクセスする。

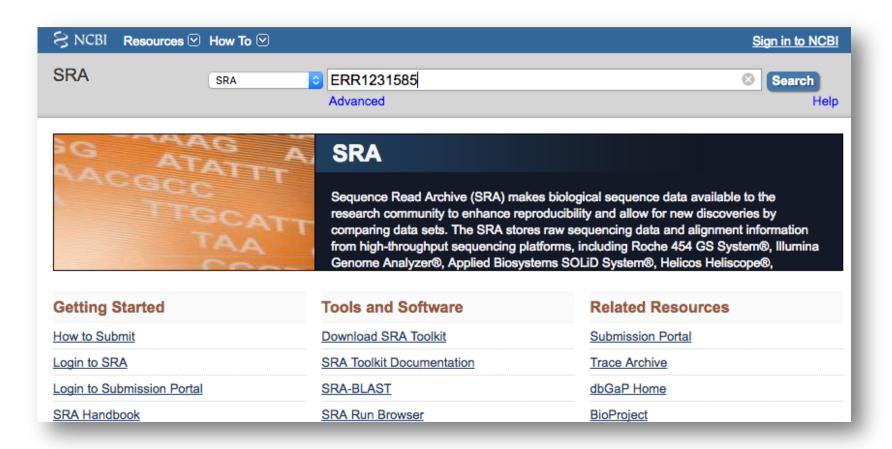

論文中などから得られたアクセッション番号のERR1231585を検索する

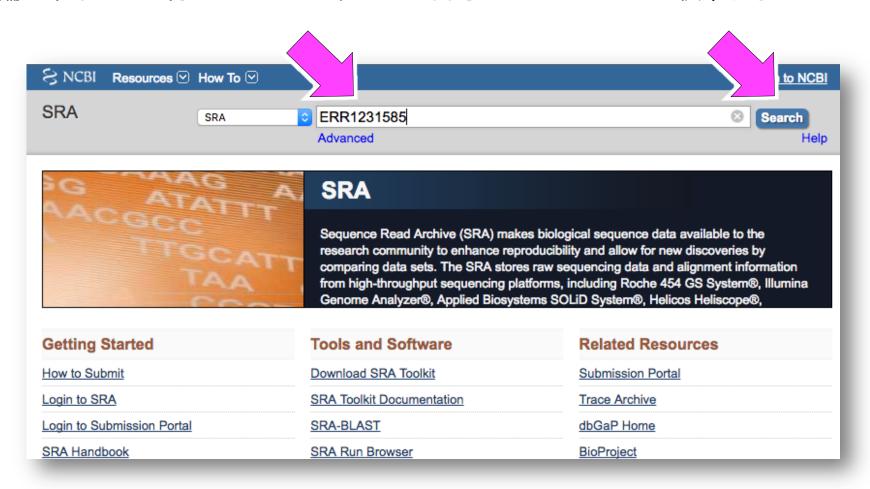


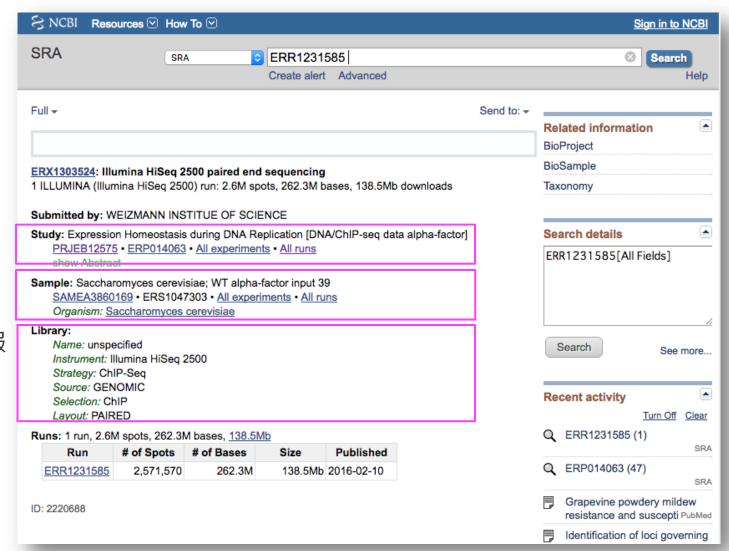


研究情報

サンプル情報


ライブラリ情報

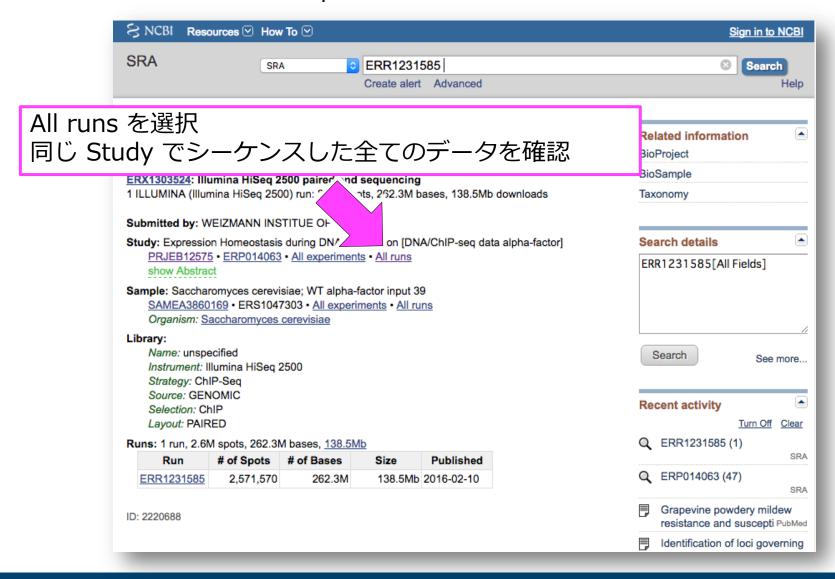


SRA Run Selector でデータを確認する

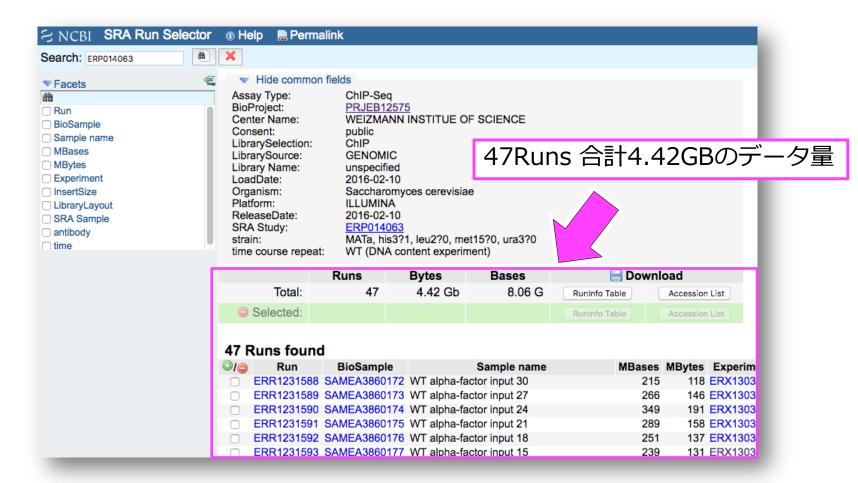

ERR1231585 (input) とERR1231597 (sample) を選択

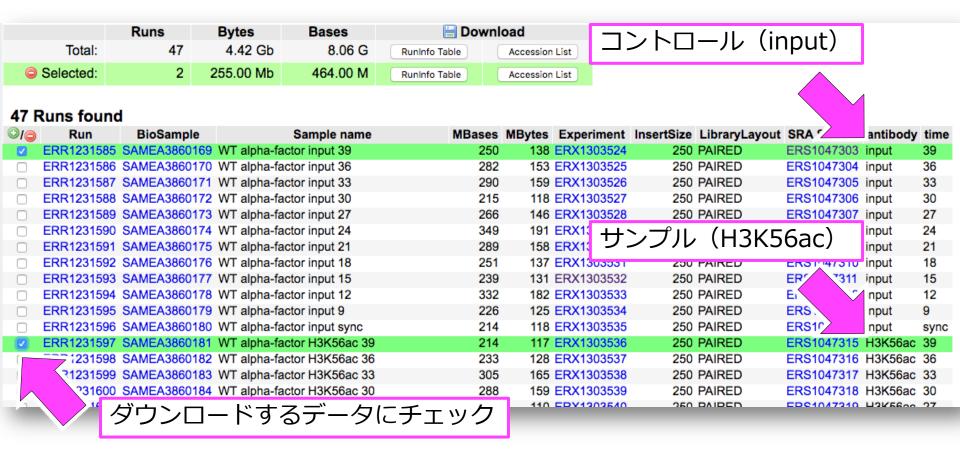


Accession List をダウンロード

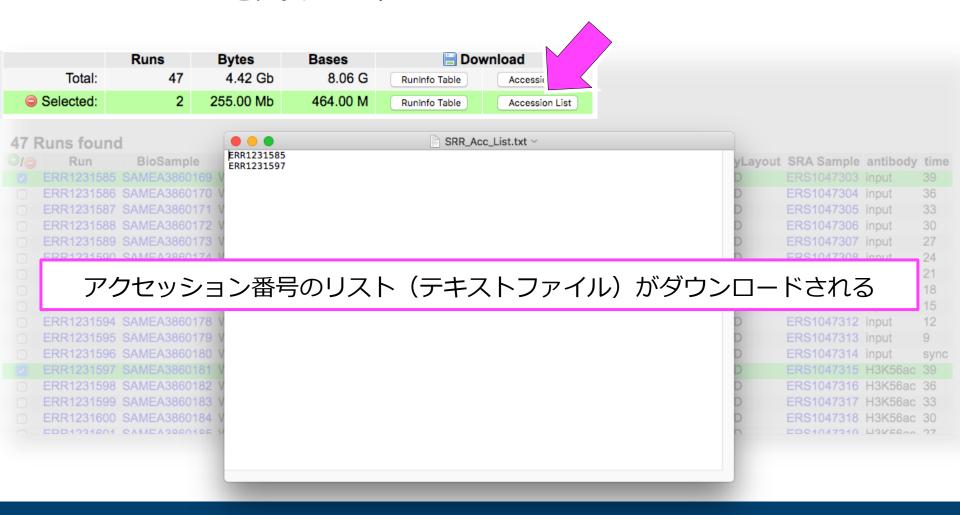

# 公開データの取得|ダウンロード方法

SRA のダウンロードには、SRA-Toolsを使用する

SRA-Tools (<a href="http://ncbi.github.io/sra-tools/">http://ncbi.github.io/sra-tools/</a>)

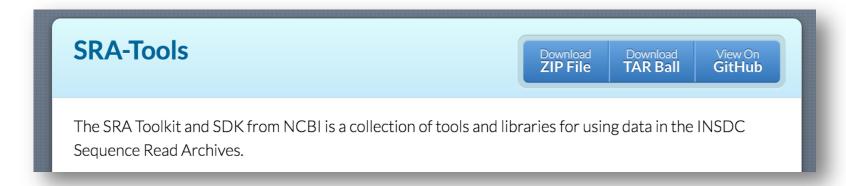

- 主な用途【実行コマンド】
  - NCBI SRA からのデータダウンロード【prefetch】
  - SRA→FASTQのフォーマット変換【fastq-dump】

### 公開データの取得|ダウンロード方法

- SRA-Toolsのインストール
  - 本日はデータを用意済みのため実施しません

```
$ wget http://ftp-trace.ncbi.nlm.nih.gov/sra/sdk/2.6.3/sratoolkit.2.6.3-centos_linux64.tar.gz
$ tar xf sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/prefetch \( \text{Y} \)
    /usr/local/bin/
$ ln -s sratoolkit.2.6.3-centos_linux64/bin/fastq-dump \( \text{Y} \)
    /usr/local/bin/
```

■ 参考: http://ncbi.github.io/sra-tools/install\_config.html

# 公開データの取得|ダウンロード方法

SRA-Tools の prefetch コマンドでまとめてSRAをダウンロード

ダウンロードしたAccession List(SRR\_Acc\_List.txt)を --option-file で指定

\$ prefetch --option-file SRR\_Acc\_List.txt

デフォルトでSRAは ~/ncbi/public/sra/ に保存される

\$ ls ~/ncbi/public/sra/

ERR1231585.sra ERR1231597.sra

# 公開データの取得 SRAの変換方法

SRA-Tools の fastq-dump を使用して SRA から FASTQ へ変換する

変換データを保存するディレクトリ(data)を作成する(実行済み)

- \$ mkdir data
- \$ cd data


--split-files を付けてペアエンドのファイルを分割しながらFASTQに変換する (実行済み)

どこでペアエンドかシングルエンドかを確認するのか (次のスライドで解説)

- \$ fastq-dump ~/ncbi/public/sra/ERR1231585.sra --split-files
- \$ fastq-dump ~/ncbi/public/sra/ERR1231597.sra --split-files

### 公開データの取得 SRAの変換方法

Run selector の LibraryLayout でペアエンドであることを確認できる

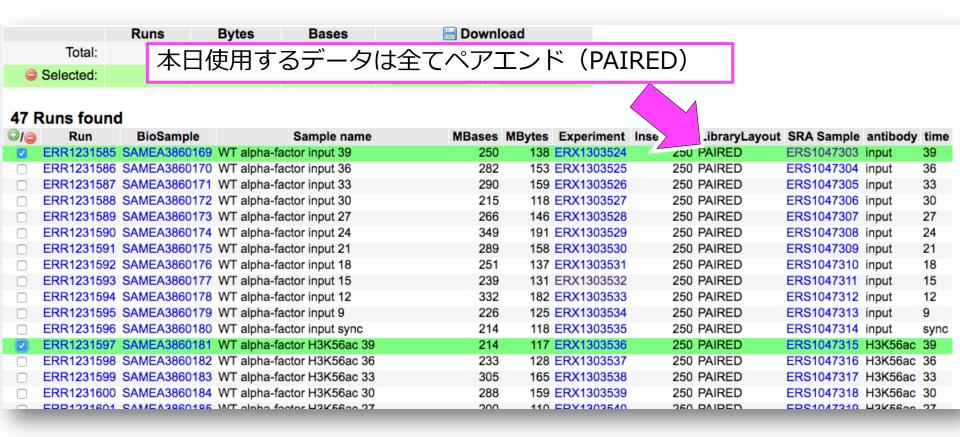



# 公開データの取得 SRAの変換方法

SRA-Tools の fastq-dump を使用して SRA から FASTQ へ変換する

変換したFASTQを確認する

```
$ 1s
```

ERR1231585\_1.fastq ERR1231597\_1.fastq ERR1231585\_2.fastq ERR1231597\_2.fastq



# 公開データの取得|実習用データの作成

seqtk(<a href="https://github.com/lh3/seqtk">https://github.com/lh3/seqtk</a>) を使用し、 実習用にFASTQからデータの一部を抜粋する

seqtk のインストール(今回は実施しません)

```
$ wget https://github.com/lh3/seqtk/archive/v1.2.tar.gz
$ tar xf v1.2.tar.gz
$ cd seqtk-1.2
$ make
$ ln -s ~/src/seqtk-1.2/seqtk /usr/local/bin/
```

### 公開データの取得|実習用データの作成

seqtk を使用し、実習用にFASTQからデータの一部を抜粋する

#### seqtk の実行

```
$ seqtk sample -s 100 ERR1231585_1.fastq 500000 > input_1.fastq
$ seqtk sample -s 100 ERR1231585_2.fastq 500000 > input_2.fastq
$ seqtk sample -s 100 ERR1231597_1.fastq 500000 > sample_1.fastq
$ seqtk sample -s 100 ERR1231597_2.fastq 500000 > sample_2.fastq
```

-s 100: シード値を100に指定 ペアで同じシード値を使うことで、 ランダムに抽出するリードのペアを保つ事ができる

500000:50万リード抽出

# 実習パート

解析対象のシーケンスデータの取得方法 (実行済み) ダウンロード、SRA→FASTQ変換

```
$ prefetch --option-file SRR_Acc_List.txt
```

\$ fastq-dump ~/ncbi/public/sra/ERR12315\*.sra --split-files

#### 実習用の軽量なデータを作成(実行済み)

```
$ seqtk sample -s 100 ERR1231585_1.fastq 500000 > input_1.fastq
$ seqtk sample -s 100 ERR1231585_2.fastq 500000 > input_2.fastq
$ seqtk sample -s 100 ERR1231597_1.fastq 500000 > sample_1.fastq
$ seqtk sample -s 100 ERR1231597_2.fastq 500000 > sample_2.fastq
```

解析対象のシーケンスデータの確認

```
$ cd /home/iu/chipseq
$ ls data
input_1.fastq.gz input_2.fastq.gz
sample_1.fastq.gz sample_2.fastq.gz
```

#### アクセッション番号との対応

それぞれ500,000リードのデータ

# クオリティコントロール QC前の品質確認

シーケンスクオリティチェックソフトウェア FastQC の実行

```
$ mkdir fastqc_before
$ fastqc --nogroup -t 2 -o ./fastqc_before ¥
   data/input_1.fastq.gz ¥
   data/input_2.fastq.gz ¥
   data/sample_1.fastq.gz ¥
   data/sample_2.fastq.gz
$ ls fastqc_before

input_1_fastqc input_2_fastqc.zip sample_2_fastqc
input_1_fastqc.zip sample_1_fastqc sample_2_fastqc.zip
input_2_fastqc sample_1_fastqc.zip
```

# クオリティコントロール QC前の品質確認

FastQCの結果確認 (QC前)

解析結果のhtmlファイルをブラウザ (firefox)で確認

```
$ firefox ¥
  fastqc_before/input_1_fastqc/fastqc_report.html ¥
  fastqc_before/input_2_fastqc/fastqc_report.html ¥
  fastqc_before/sample_1_fastqc/fastqc_report.html ¥
  fastqc_before/sample_2_fastqc/fastqc_report.html
```

ブラウザでタブが4つ開かれ、 クオリティチェックの解析結果が確認できる

# クオリティコントロール QC前の品質確認

### fastqc summary (QC前)

### input1

#### **Summary**

- Basic Statistics
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- Kmer Content

### input2

#### **Summary**

- Basic Statistics
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- **Kmer Content**

### sample1

#### Summary

- **Basic Statistics**
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- **Kmer Content**

### sample2

#### Summary

- Basic Statistics
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- Kmer Content



# クオリティコントロール | QC処理

今回のデータに対する処理 (Trimmomaticを用いた一括処理①)

```
$ mkdir trimmed_data
$ java -jar /usr/local/bin/trimmomatic-0.36.jar PE ¥
   -threads 2 -phred33 ¥
   data/input_1.fastq.gz ¥
   data/input_2.fastq.gz ¥
   trimmed_data/input_1_paired.fastq ¥
   trimmed_data/input_1_unpaired.fastq ¥
   trimmed_data/input_2_paired.fastq ¥
   trimmed_data/input_2_unpaired.fastq ¥
   LEADING:20 TRAILING:20 SLIDINGWINDOW:4:15 MINLEN:36
```

「sample~」でも同様の処理を実行

# クオリティコントロール | QC処理

今回のデータに対する処理 (Trimmomaticを用いた一括処理②)

```
$ java -jar /usr/local/bin/trimmomatic-0.36.jar PE ¥
   -threads 2 -phred33 ¥
   data/sample_1.fastq.gz ¥
   data/sample_2.fastq.gz ¥
   trimmed_data/sample_1_paired.fastq ¥
   trimmed_data/sample_1_unpaired.fastq ¥
   trimmed_data/sample_2_paired.fastq ¥
   trimmed_data/sample_2_unpaired.fastq ¥
   LEADING:20 TRAILING:20 SLIDINGWINDOW:4:15 MINLEN:36
```

CPUのコア数に余裕があれば -threads の数値を大きくすることでより高速に処理することが可能

## TIPS CPUコア数を確認してみる

\$ cat /proc/cpuinfo

```
: 1
processor
               : GenuineIntel
vendor id
cpu family
               : 6
model
               : 70
model name
               : Intel(R) Core(TM) i7-4980HQ CPU @ 2.80GHz
stepping
               : 2793.532
cpu MHz
cache size
               : 6144 KB
                               cpu cores を確認
physical id
               : 0
               : 2
siblings
                                ここでは 2 となっている
core id
               : 1
               : 2
cpu cores
apicid
initial apicid
               : 1
fpu
               : yes
fpu exception
               : yes
cpuid level
               : 13
wp
               : yes
flags
               : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep
ll nx rdtscp lm constant tsc rep good nopl xtopology nonstop t
```

全てのコアを使用して計算しようとすると

かえって遅くなる時もあるので、コマンド実行時は様子を見ながら増やす

# クオリティコントロール QC後の品質確認

### FastQCの結果確認 (QC後)

```
$ mkdir fastqc after
$ fastqc --nogroup -t 2 -o fastqc_after ¥
  trimmed data/input 1 paired.fastq ¥
  trimmed_data/input_2_paired.fastq ¥
  trimmed_data/sample_1_paired.fastq ¥
  trimmed data/sample 2 paired.fastq
$ firefox ¥
  fastqc after/input 1 paired fastqc/fastqc report.html ¥
  fastqc_after/input_2_paired_fastqc/fastqc_report.html ¥
  fastqc_after/sample_1_paired_fastqc/fastqc_report.html ¥
  fastqc_after/sample_2_paired_fastqc/fastqc_report.html
```

# クオリティコントロール | QC前の品質確認

### FastQC summary (QC後)

### input1

#### **Summary**

- Basic Statistics
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- Kmer Content

### input2

#### **Summary**

- **Basic Statistics**
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- **Kmer Content**

### sample1

#### Summary

- Basic Statistics
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- Kmer Content

### sample2

#### Summary

- Basic Statistics
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- Kmer Content



# クオリティコントロール QC前の品質確認

OC前

### input\_1 **Summary**

- Basic Statistics
- Per base sequence quality Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- Kmer Content

#### input2

#### Summary

- Basic Statistics
- Per base seguence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Seguence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- Kmer Content

#### sample1

#### Summary

- Basic Statistics
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- **Kmer Content**

#### sample2

#### Summary

- Basic Statistics
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- Kmer Content

#### Summary

- Basic Statistics
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels Overrepresented sequences
- **Kmer Content**

#### Summary

- **Basic Statistics**
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- Kmer Content

#### Summary

- Basic Statistics
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- Kmer Content

#### Summary

- Basic Statistics
- Per base sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per base GC content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- Kmer Content

## マッピング

### Bowtie2によるマッピング(inputファイル)

```
$ mkdir mapping
$ bowtie2 -p 2 -x /home/iu/genome/sacCer3/Bowtie2Index/genome ¥
   -1 trimmed_data/input_1_paired.fastq ¥
   -2 trimmed_data/input_2_paired.fastq | ¥
   samtools view -Sb - > mapping/input.bam
$ samtools sort mapping/input.bam -o mapping/input.sorted.bam
```

- bowtie2のオプション
  - -p: 使用するスレッド数
  - -x: bowtie2で作成したゲノムファイルインデックス
  - -1,-2: 入力fastqファイル
- Samtoolsのオプション
  - view: SAMもしくはBAMの中身を表示
  - -Sb: SAMからBAMへ変換

## マッピング

Bowtie2によるマッピング(sampleファイル)

```
$ bowtie2 -p 2 -x /home/iu/genome/sacCer3/Bowtie2Index/genome ¥
   -1 trimmed_data/sample_1_paired.fastq ¥
   -2 trimmed_data/sample_2_paired.fastq | ¥
   samtools view -Sb - > mapping/sample.bam
$ samtools sort mapping/sample.bam -o mapping/sample.sorted.bam
```

#### MACS2によるピーク検出

```
$ macs2 callpeak \u224
  -t mapping/sample.sorted.bam \u224
  -c mapping/input.sorted.bam \u224
  --outdir macs2_res \u224
  -f BAMPE -n handson2016 -B -q 0.01 -g 1.2e+7
```

- -t ターゲットサンプル(IP)のファイル
- -c -tに対するコントロール(input)サンプルのファイル
- --outdir 結果を出力するディレクトリ
- -f -tで指定したファイルのファイル形式 BAM、SAM、BED他様々なフォーマットが指定可能 BAMPEはpaired-end readをマッピングしたbamファイル

(コマンドの説明は次スライドに続きます→)

#### MACS2によるピーク検出

- \$ macs2 callpeak ¥
   -t mapping/sample.sorted.bam ¥
   -c mapping/input.sorted.bam ¥
   --outdir macs2\_res ¥
   -f BAMPE -n handson2016 -B -q 0.01 -g 1.2e+7
- -n 出力ファイルの接頭文字
- -B フラグメントのpileup、control lambda値などをBedGraph形式で保存
- peakcallするピークの閾値(Benjamini-HochbergによるFDRのq値) -q 【デフォルト 0.01】
  - 反復領域を除いたゲノムサイズ
- -g 一部のモデル生物では数字ではなく、ヒト:hs、マウス:mmなどの省略が可能

#### MACS2によるピーク検出

```
$ ls macs2_res
```

handson2016\_control\_lambda.bdg handson2016\_summits.bed handson2016\_peaks.narrowPeak handson2016\_treat\_pileup.bdg handson2016\_peaks.xls

各出力ファイルの解説は、NGS Surfer's Wikiが参考になる https://cell-innovation.nig.ac.jp/wiki/tiki-index.php?page=MACS

この後のモチーフ探索には、ピークの領域情報が記載された handson2016\_peaks.narrowPeak を用いる

### 先頭の5行を確認

<pre>\$ head -5 handson2016_peaks.narrowPeak</pre>						
chrI 114052 4.66642	114468 252	handson2016_peak_1	46 .	3.84001	8.16057	
chrII 35630 3605	016_peak_2 64 .	4.27147	10.05951	6.44232		
198 chrIV427318	427670	handson2016_peak_3	560 .	4.41420	61.01538	
56.00628 chrIV 769592	186 769918	handson2016_peak_4	29 .	3.31637	6.20275	
2.95610 chrIV991149 4.05226	157 991514 235	handson2016_peak_5	40 .	2.81939	7.45001	

handson2016\_peaks.narrowPeakの項目解説

列	例		
1:染色体番号	chrI		
2:ピーク開始位置	114052		
3:ピーク終了位置	114468		
4:ピークの名前	handson2016_peak_1		
5:ピークのスコア	46		
6:ストランド			
7 : fold-change	3.84001		
8 : -log10pvalue	8.16057		
9 : -log10qvalue	4.66642		
10:ピーク開始位置から頂点までの 距離	252		



■ 検出したピークをIGVで可視化する

#### BAMファイルのインデックスを作成


```
$ cd mapping
```

- \$ samtools index input.sorted.bam
- \$ samtools index sample.sorted.bam

#### IGVで下記のファイルを表示

- handson2016\_peaks.narrowPeak
- 2. input.sorted.bam
- 3. sample.sorted.bam



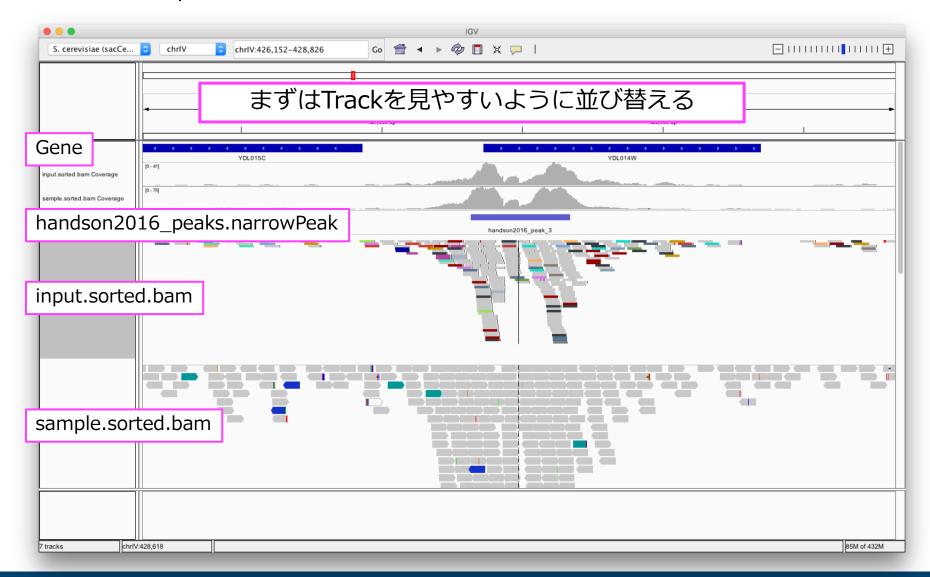





#### スコアの高いピークを確認


```
$ cd macs2_res
$ cat handson2016_summits.bed | sort -k 5n
```

### もっとも高いスコアを示したピーク名をIGVの検索窓に入れ検索

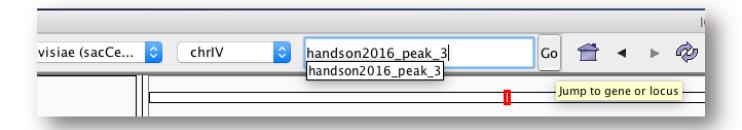


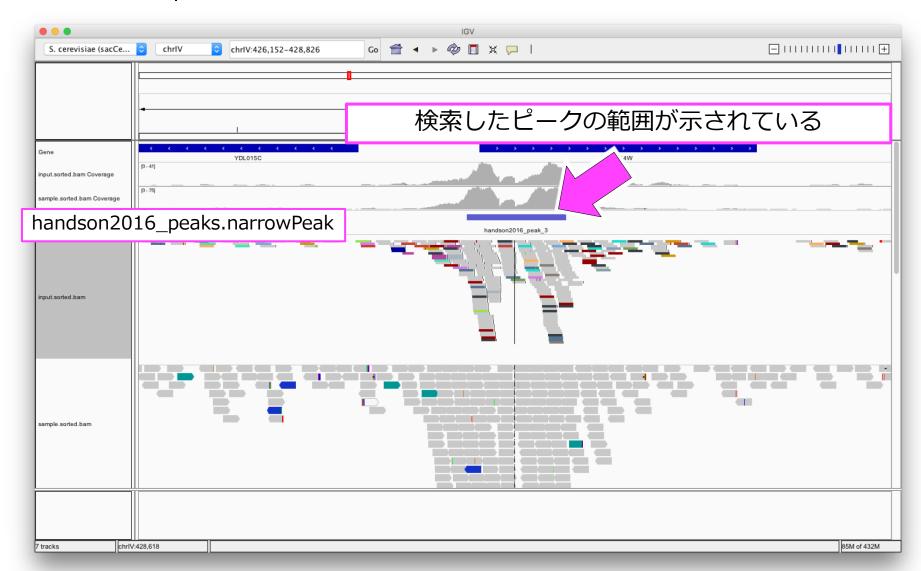




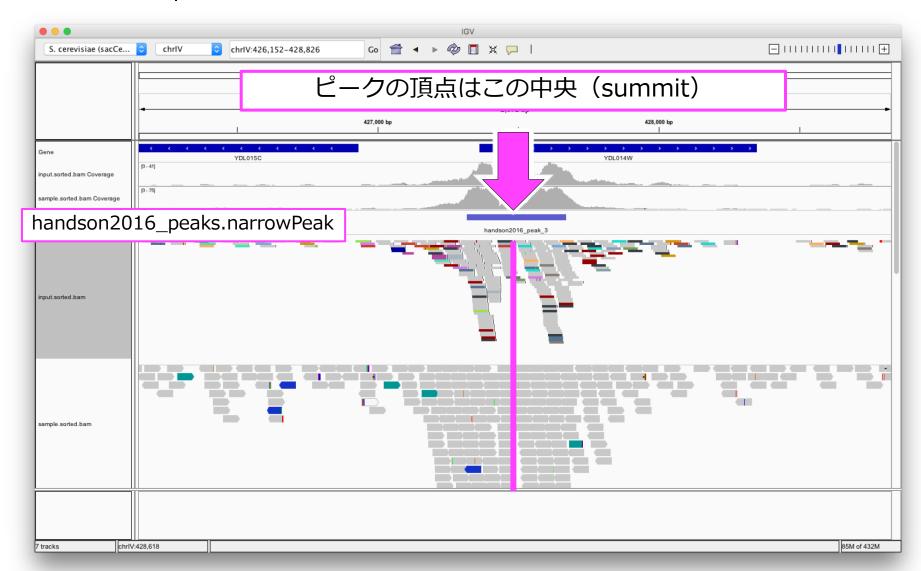




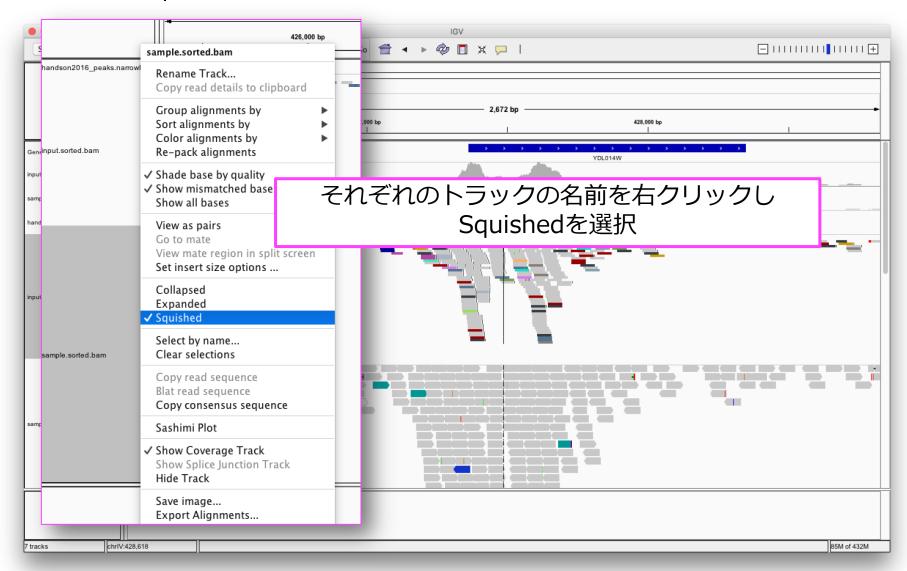




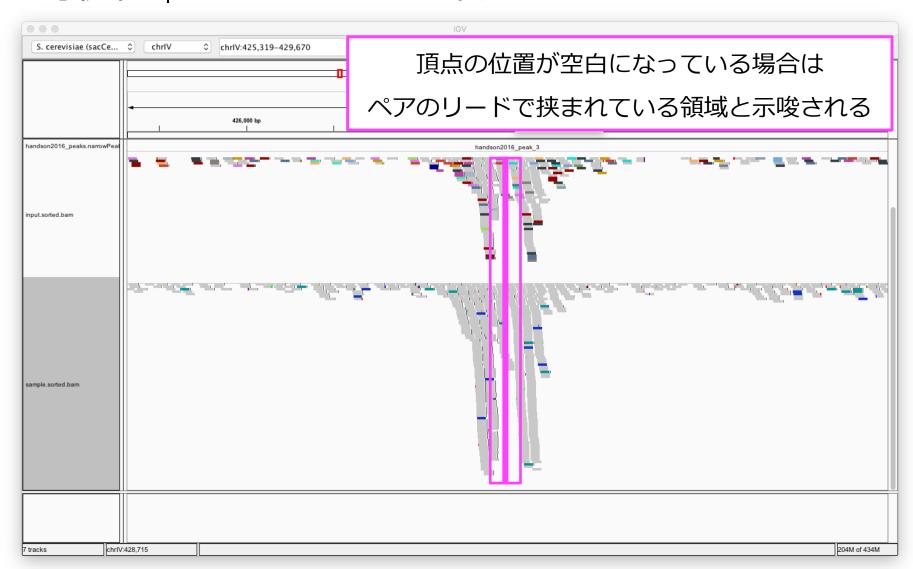



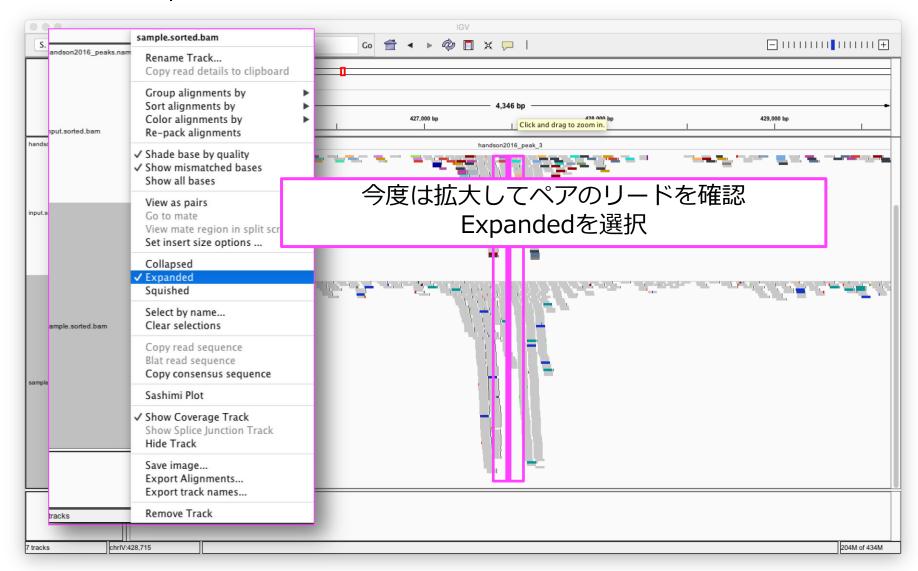



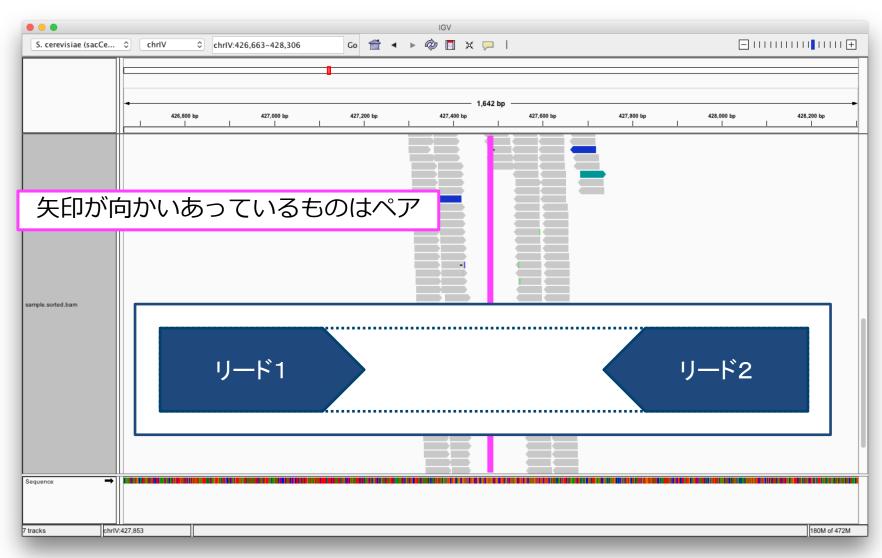

handson2016\_summits.bedに対してsnpEffによるアノテーションを実施

アノテーション作業用のディレクトリを作成し アノテーション前のファイルを確認

- \$ mkdir annotation
- \$ cd annotation
- \$ cat ../macs2\_res/handson2016\_summits.bed

handson2016\_summits.bedに対してsnpEffによるアノテーションを実施する

```
$ java -jar /usr/local/bin/snpEff.jar eff \u2204
  -csvStats stats.txt -c /usr/local/bin/snpEff.config \u2204
  -i bed -o bedAnn R64-1-1.82 \u2204
  ../macs2_res/handson2016_summits.bed > \u2204
  handson2016_summits.annotated.bed
```

```
    eff 入力ファイルにアノテーションを行う
    -csvStats csv形式のサマリーファイルを作成する
    -c snpEffの設定ファイルを指定
    -i 入力ファイルのフォーマット
    -o 出力ファイルのフォーマット
```

(コマンドの説明は次スライドに続きます→)

handson2016\_summits.bedに対してsnpEffによるアノテーションを実施する

```
$ mkdir annotation
$ cd annotation
$ java -jar /usr/local/bin/snpEff.jar eff ¥
   -csvStats stats.txt -c /usr/local/bin/snpEff.config ¥
   -i bed -o bedAnn R64-1-1.82 ¥
   ../macs2_res/handson2016_summits.bed > ¥
   handson2016_summits.annotated.bed
```

```
R64-1-1.82 アノテーションに使用するゲノムバージョン
../macs2_res/handson2016_ 入力ファイル
summits.bed
```

snpEffを用いたアノテーション方法

\$ less handson2016\_summits.annotated.bed

```
Chromo
           Start
                    End
                             Variant; Annotation
                                                       Score
           113613
                    114615
                             I:114304; EXON: ATS1
           114249
                    114819
                             I:114304; GENE: YAL019W-A
           109918
                             I:114304; UPSTREAM: FUN30
                    114918
           113563
                    118563
                             I:114304; DOWNSTREAM: LDS1
```

検出されたピークのsummitについて、遺伝子名とその遺伝子に対してエクソン・上流・下流などの情報が付与される

R Bioconductor package 'rGADEM' を用いたde novo モチーフ検索①

```
$ mkdir ../motif
$ cd ../motif
$ R
R version 3.2.0 (2015-04-16) -- "Full of Ingredients"
Copyright (C) 2015 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86 64-pc-linux-gnu (64-bit)
R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.
```

R Bioconductor package 'rGADEM' を用いたde novo モチーフ検索②

> library(rGADEM)
> library("BSgenome.Scerevisiae.UCSC.sacCer3")
> BED <- read.table("../macs2\_res/handson2016\_peaks.narrowPeak",
 header=FALSE, sep="\text{Y}")
> BED < data.frame(chr=as.factor(BED[,1]),
 start=as.numeric(BED[,2]), end=as.numeric(BED[,3]))</pre>

MACS2から出力されたBEDファイルを、データフレームとして読み込む

再び、 handson2016\_peaks.narrowPeak を使用

R Bioconductor package 'rGADEM' を用いたde novo モチーフ検索③


```
> rgBED <- IRanges(start = BED[, 2], end = BED[, 3])
> Sequences <- RangedData(rgBED, space = BED[, 1])
> gadem <- GADEM(Sequences, verbose = 1, genome = Scerevisiae)
> pdf("motif.pdf")
> plot(gadem)
> dev.off()
> q()
```

ピーク領域に頻出するモチーフを取得し、PDFにプロット

出力したモチーフを確認

\$ evince motif.pdf


この後さらに、MotIVなどを使用し、 検出したDNAモチーフが既知の モチーフに似ているかどうか調べる ことも可能

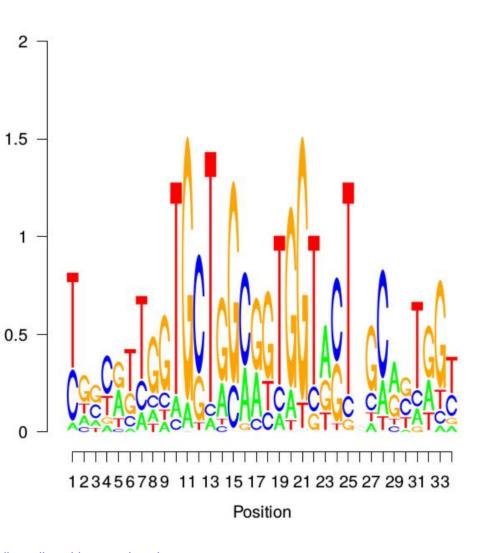

MotIV: https://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/MotIV.html

Information content

# まとめ | ChIP-seq解析の流れ

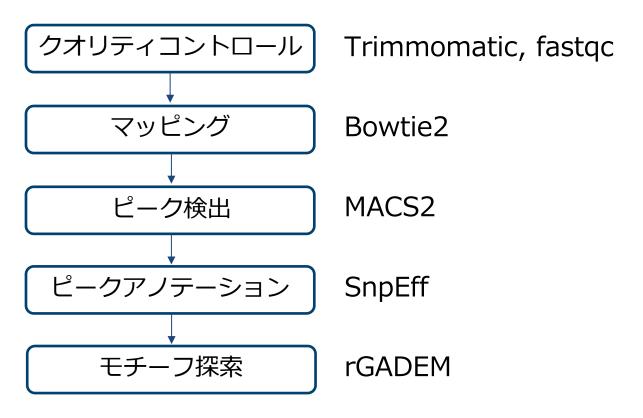

- ChIP-seq解析の一般的な流れであり、 全てのChIP-seqで同一の解析を行うわけではない
- 研究の目的やデータに合わせて、最適な解析を設計